

SKM SNOW PAC スノーパック


陰圧式手術体位固定具

より安定した、快適な患者の体位固定を・・・



スノーパックは短時間で、簡単に手術時の患者の体位を術式や体形に合わせて固定することができます

Before

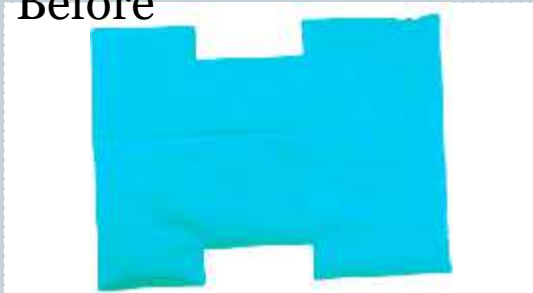

スノーパックには数千の細かいプラスチックビーズが内蔵されており、壁吸引や陰圧ポンプにより陰圧をかけることで、簡単に素早く(15秒以内)しっかりと患者の体位固定ができます。

- ・体形にフィットさせて保持するので、圧力の集中を防ぎ、患者が楽な姿勢をとることができる。
- ・安定性と快適性が両立されている。

After



- ・多用途に対応
- ・使用方法が簡単
- ・手術室での体位固定にかかる時間の節約が可能
- ・様々な用途に応じて使用可能な、豊富なラインナップ(5タイプ、10種類)
- ・使用後は、バルブを開放すると元の状態に戻ります。

<製品ラインナップ>

◆ Aタイプ

側臥位、特殊な体位形成に（腎臓手術、脳性麻痺の患者や、整形、胸部外科等の体位形成）



A Type 73(L) x 100(W)



A-1 Type 73(L) x 100(W)



A-1-2 Type 73(L) x 100(W)

A-1-1 Type 90(L) x 100(W)

A-1-3 Type 90(L) x 100(W)

◆ Bタイプ

甲状腺摘出手術の体位形成に
（甲状腺手術において、頸部の過伸展を容易に形成し、
手術後の不快感を予防）



B Type 72 (L) x 88 (W)
B-1 Type 118 (L) x 88 (W)

◆ Cタイプ

頭部の安定に（頭部、目、歯科手術の際に）



C Type 30 (L) x 40 (W)

◆ Dタイプ

スパインポジション用に最適
（長時間の手術においても、腰痛を予防する
また、足が下がるのを防ぎ、救急時のギプスとしても使用可能）



D Type 30 (L) x 55 (W)

◆ Eタイプ

全身固定用に最適



E Type 165 (L) x 72 (W)

- 材質：パッド(外装):ポリウレタン
- 洗浄：液体洗剤(酸性不可)、消毒用アルコール清拭可
- ビーズ(内部):ポリエチレン
- 滅菌：ガス滅菌可

<一般医療機器> 届出番号27B1X00024000283

 **エアウォーターリンク株式会社**

本社 特販部 TEL075-694-1063 FAX075-694-1071
東京営業所 TEL03-3830-2231 FAX03-3830-2233
E-mail: import@awlink.co.jp